

Prenatal Listener®



OWNER'S MANUAL

KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

©2009 Graco PD116361B 11/09

WARNING

Failure to follow these warnings and the assembly instructions could result in serious injury or death.

- **WARNING:** This product is not a toy.
- Product is intended for adult use only.
- **STRANGULATION HAZARD.** Keep the cords out of the reach of children.
- **DO NOT** immerse any part of the Prenatal Listener®, in water. Clean only with a dry cloth.
- **DO NOT** place unit near water and moisture. Do not use the Prenatal Listener® outdoors. Do not use the Prenatal Listener® near possible wet areas, such as a bathtub, shower, wash basin, sink, laundry tub, swimming pool, wet basement, etc.
- **Keep Prenatal Listener® away from heat sources**, such as fireplaces, radiators, stoves, and TVs or other appliances. Heat can damage the case or electrical parts.
- **DO NOT** use the Prenatal Listener® Unit if:
 - The cords or plugs have been damaged.
 - The unit has been exposed to liquids.
 - Unit has been dropped or is damaged.
- **DO NOT OPEN THE PRENATAL LISTENER®.** No user-serviceable parts inside. Risk of electrical shock, fire or death.

WARNING

FOR SAFE BATTERY

USE: Keep the batteries out of children's reach.

Any battery may leak battery acid if mixed with a different battery type, if inserted incorrectly (put in backwards) or if all batteries are not replaced or recharged at the same time. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.

Any battery may leak battery acid or explode if disposed of in fire or an attempt is made to charge a battery not intended to be recharged. Never recharge a cell of one type in a recharger made for a cell of another type.

Discard leaky batteries immediately. Leaky batteries can cause skin burns or other personal injury. When discarding batteries, be sure to dispose of them in the proper manner, according to your state and local regulations.

Remove batteries before storing product for a prolonged period of time. Batteries left in the unit may leak and cause damage.

Recommended type batteries—alkaline disposables, size 9-volt (6LR61) not included. NEVER mix battery types. Change batteries when product ceases to operate satisfactorily.




Batteries should be disposed of properly by recycling.


Parts



Prenatal Listener

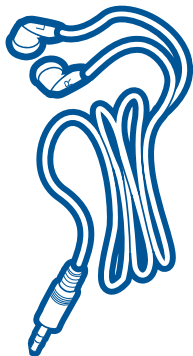

Earbuds (2x)

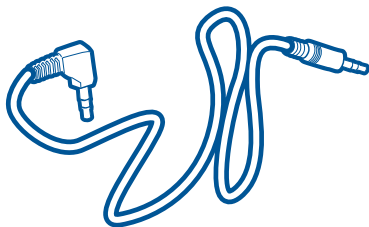

Recording Cable

Listening to Unborn Baby ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Introduction

Thank you for purchasing the Graco® Prenatal Listener®. Please read the following material carefully to maximize your enjoyment of this product.

It is important to understand that many factors affect what you will hear with the Prenatal Listener®. The position of your baby, your baby's weight, your weight, your stage of pregnancy, and where you place the Prenatal Listener® will all affect what you will hear.

For example, when listening for the fetal heartbeat, the sound will be loudest in the third trimester and if your baby is positioned with their back to your belly button. Your baby may naturally shift position, thereby creating the situation where you will hear your baby one moment but not the next.


However, once you've passed the second trimester, your baby will be growing very rapidly and you will hear the heartbeat and all the other sounds on a much more regular basis.

Don't worry! It's quite normal that there will be times you will not be able to hear your baby's sounds due to your baby's position or stage of development. This is especially true of the heartbeat which is highly dependent on your baby's position.



Please Read to Enjoy Our Product

- Please have patience. This product requires a little time but the results are wonderful. You should start using it at the beginning of your third trimester.
- What you will hear through the Prenatal Listener® will be the natural sounds of your baby. Your doctor uses Doppler ultrasound equipment which produces artificial noise by turning movement into sound. The Prenatal Listener® amplifies the actual sounds of your baby.
- The best time to listen is 3 to 4 hours after eating and when you are relaxed.
- The Prenatal Listener® must be used in a very quiet room.
- Placing the volume control at a low to moderate level will produce the best results and avoid static.
- You might not hear your baby's sounds immediately so don't be disappointed. The more you use the Prenatal Listener®, the better you will become at finding the sounds. Your baby's position will also greatly affect your success. The best position is with your baby's back to your belly button. Your success will also depend on how relaxed you are. You may have to try several times before you will hear your baby's sounds, particularly the heartbeat.
- Your baby's heartbeat does not sound like your own. A fetal heart beats from 120-180 times per minute. It will sound like a soft, rapidly beating drum.
- You will also hear kicks, hiccups, and nutrients passing through the placenta. Kicks sound like uneven thumps, hiccups like two rapid drum beats, and the nutrients like a whooshing sound.
- The Prenatal Listener® does not use any AC current, ultra sound, or radio waves.


Installing the Battery ●●●●●●●●●●

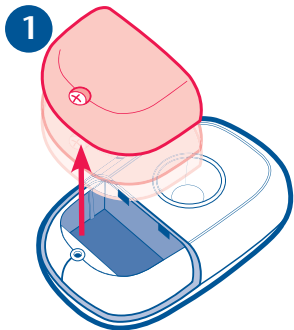


Loosen the screw and remove the battery cover and install a new 9-volt (6LR61) battery (not included). We recommend using a new battery as an old one will severely interfere with the performance of your Prenatal Listener®. Be sure to match positive (+) to positive (+) and negative (-) to negative (-).

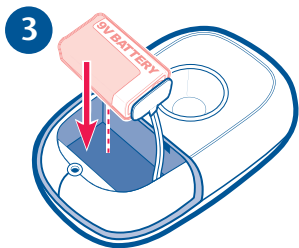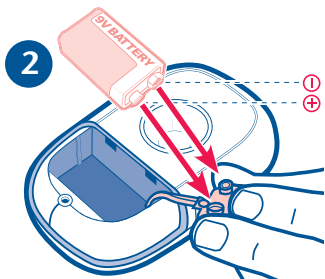

4

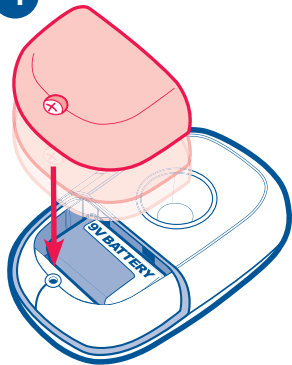


Replace the battery cover and tighten the screw.

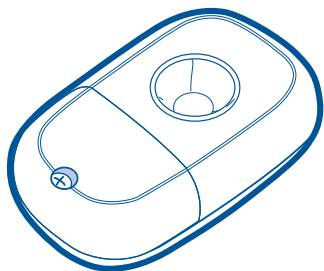


Listening to Your Unborn Baby ● ● ● ● ●

1

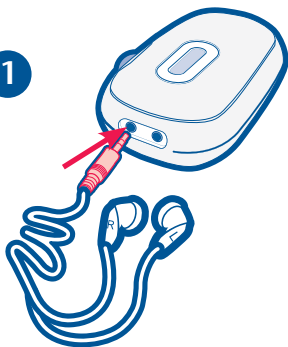


Insert the earbud plug into either jack on the unit and insert the earbuds into your ears.

2

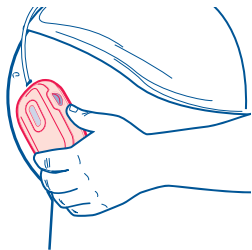


Hold the Listener to your stomach or lower back. Use the Prenatal Listener® on bare skin in a quiet room.

3

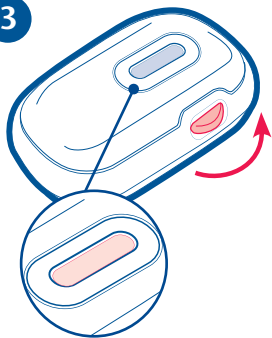


Turn the Prenatal Listener® on by turning the Power/Volume control wheel to the counterclockwise until you hear a click. The blue power indicator on the front will light up to indicate the unit is in the ON position.

4

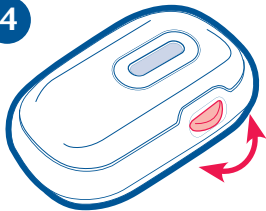


Adjust the volume to optimize the listening level and amplification. Begin with a low to moderate level to avoid static.

5

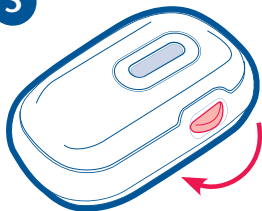


Before moving the Prenatal Listener®, turn the volume level down (turn clockwise) to the lowest position to avoid the sound of the cone moving against your skin.

6

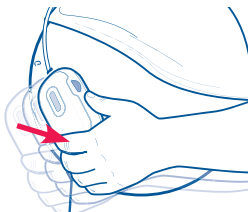

Start by placing the Prenatal Listener® two inches below and several inches to the right of your belly button. Gently move the unit one inch at a time to different places occasionally pausing until you find the best position for listening to your baby's sounds.


7

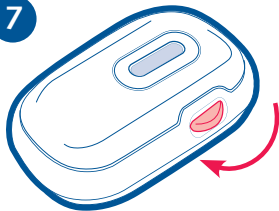

When you are finished, turn the Power/Volume control wheel all the way to the clockwise until you hear a click to turn the Prenatal Listener® off. The blue power indicator light will turn off.


To Record Unborn Baby ●●●●●●●●●●

1

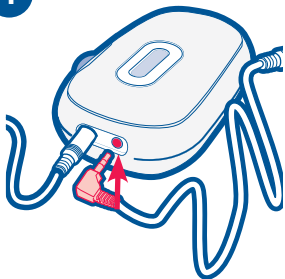


Plug the L-shaped end of the recording cable into either jack of the Prenatal Listener®.

2

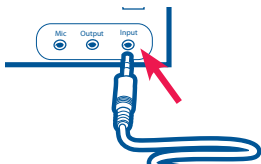

Plug the straight end into the line input of your recorder (some portable recorders do not provide this input). If your recorder does not have a line input, use the microphone input instead.

3

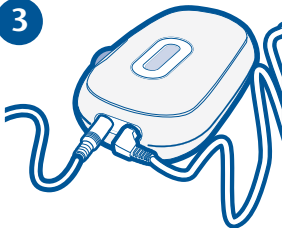

Set up the Prenatal Listener® for listening to your baby.

4

Adjust the recording level on your recorder if necessary.

5


Hold the Prenatal Listener® very still and begin recording. Remember, the sound of your heartbeat can have a very calming and soothing effect on your baby. You may want to record your own heartbeat before your baby is born. You will then be able to play back your recorded heartbeat to your baby after birth. We recommend a 30-minute recording.

NOTE: You will need to reduce the volume when you record your own heartbeat since it is much louder than that of your unborn baby's.

To Record and E-mail Using a Computer (if available)


If a sound recorder is available on your computer, you can use it to record your baby's sounds.

1

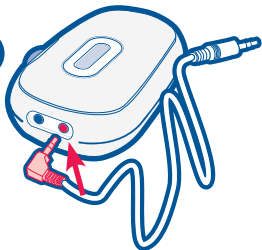

Plug the L-shaped end of the recording cable into either jack on the Prenatal Listener®.

2

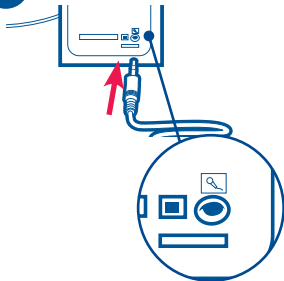

Plug the end into the microphone jack on your computer. This is indicated by a picture of a microphone near the jack or the jack is color coded pink on the back of your computer.

3

Refer to your computer's User manual for detailed instructions on accessing and using your sound recording software.

Additional Product Information ● ● ● ●

Tips for Using the Prenatal Listener®

- The Prenatal Listener® has powerful amplification capabilities required to pick up the quiet sounds produced by your baby. To protect your ears and prevent feedback (squealing sounds), do not turn on the unit unless the listener is pressed against your body.
- There are many different sounds being produced by your baby and your body. Increasing the volume also increases these sounds. Keeping the volume at a moderate level usually produces the best results; therefore, adjust the volume carefully.
- Your baby's heartbeat is a very low volume sound and is very difficult to detect until the third trimester. Patience and very careful listening are required to locate the best position to hear the heartbeat. It is perfectly normal to hear it on some days and not others due to your baby's position and movements. It is also normal that you will hear it one moment and not the next. Don't worry! It is very natural for your baby to shift positions.

Troubleshooting ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1. You can not hear your unborn baby with the Prenatal Listener®.

- a. It may be too early in your pregnancy to hear your baby. Wait until you are in your third trimester when the fetal heartbeat starts becoming louder.
- b. It is quite normal not to hear your baby due to their position. Try again later. The best time to listen is 3 to 4 hours after a meal and when you are relaxed. You may also want to try placing the Prenatal Listener® against your lower back as this may help minimize interference from your own body's sounds.
- c. Unit is not on. Turn unit on by turning the Power/Volume control wheel counterclockwise until you hear a click and the blue power indicator lights up.
- d. Volume control is turned down. Increase the volume by turning the Power/Volume control wheel counterclockwise.

e. The earbuds are not connected to the monitor. Make sure the earbuds are securely plugged into either jack on the monitor.

f. Battery is low. Blue power indicator light will dim. Insert a new 9-volt (6LR61) alkaline battery.

g. Battery is not inserted properly. Open the battery compartment and check to see that positive (+) is matched with positive (+) and negative (-) is matched with negative (-).

2. There is feedback (squealing noises) when you use your Prenatal Listener®.

a. The volume is too high. Turn the volume down by turning the wheel clockwise.

b. Lower the volume before moving the Prenatal Listener® against your skin.

3. You cannot record from the Prenatal Listener®.

a. The recording cable is not plugged in correctly. Make sure the end of the recording cable is securely plugged into either jack on the Prenatal Listener® and the straight end into the line input of your recorder.

b. Recorder cable is not in correct jack of recorder.

c. The volume control is turned down on your recorder. Increase the volume.

NOTE: Consult instruction manual for your recorder.

4. There is too much background noise and it makes a scratching sound when you move it.

Turn the volume down BEFORE you move the Prenatal Listener® from one spot to the next and don't turn it up again until you are no longer moving it against your stomach.

Care and Maintenance ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

- To clean the Prenatal Listener®, wipe with a soft dry or slightly damp cloth. Do not submerge in water or any other liquid.
- Store in a cool dry place.
- Keep out of the reach of children when not in use.
- Do not disassemble the Prenatal Listener®.
- Only use a 9-volt (6LR61) alkaline battery.
- During long periods of non-use, remove battery from the compartment.
- Please dispose of batteries properly and safely.
- Do not use or place open flames such as lighted candles on or near the unit.
- The Prenatal Listener® should be used at normal room temperature. Do not use in extreme heat or cold.

Disclaimer

THE GRACO® PRENATAL LISTENER® IS NOT A MEDICAL DEVICE.

The Graco® Prenatal Listener® is not a medical device and should not be used or relied upon in any way for diagnostic or other medical purposes. Any concerns about your pregnancy should be addressed with a medical practitioner. The Graco® Prenatal Listener® is not intended to be and should not be used as a substitute for regular prenatal care by an appropriate medical practitioner. You are encouraged to seek such prenatal care in connection with your pregnancy.

The Graco® Prenatal Listener® should be used only in accordance with the instructions provided herein, and the manufacturers and distributors of the Graco® Prenatal Listener® are not responsible for inappropriate use. The manufacturer expressly disclaims liability for incidental, consequential, or special damages of any nature.



Replacement Parts Warranty Information (USA)

To purchase parts or accessories or for warranty information in the United States, please contact us at the following:

Graco Children's Products
3 Glenlake Parkway
Atlanta, GA 30328

www.gracobaby.com
or
1-800-345-4109

Product Registration (USA)

To register your Graco product from within the U.S.A. visit us online at

www.gracobaby.com/productregistration.

We currently do not accept product registrations from those living outside the United States of America.

Prenatal Listener®



GRACO

MANUAL DEL PROPIETARIO
GUARDE LAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO.

ADVERTENCIA

No observar estas advertencias y las instrucciones de armado podría resultar en lesiones serias o la muerte.

- **ADVERTENCIA:**

Este producto no es un juguete.

- El producto es apto para que solamente lo usen personas adultas.

- **PELIGRO DE ESTRANGULACIÓN.**

Mantener los cordones del adaptador lejos del alcance de los niños. No lo use con cordones de extensión.

- **NO** sumerja ninguna parte del Prenatal Listener® en agua. Límpielas solamente con un trapo seco.

- **NO** ponga la unidad cerca del agua o humedad. No use el Prenatal Listener® a la intemperie. No use el Prenatal Listener® cerca de posibles lugares húmedos, tales como bañeras, duchas, lavaderos, fregaderos,

lavarropas, piscinas, sótanos húmedos, etc.

- **Mantenga el Prenatal Listener® lejos de fuentes de calor**, tales como estufas a leña, radiadores, cocinas y televisores u otros aparatos. El calor puede dañar la caja o piezas eléctricas.

- **NO** use la unidad del Prenatal Listener® si:

- Los cordones del adaptador o enchufes han resultado dañados
- La unidad ha entrado en contacto con líquidos.
- La unidad se ha caído o ha resultado dañada.

- **NO ABRA EL PRENATAL LISTENER®.** No hay partes que el usuario pueda arreglar en el interior. Riesgo de choque eléctrico, incendio o muerte.

ADVERTENCIA

PARA UN USO SEGURO DE LAS PILAS:

Mantenga las pilas lejos del alcance de los niños. Cualquier pila puede perder ácido si se la mezcla con un tipo diferente de pila, si se la coloca de manera incorrecta (puesta al revés) o si no se cambian o recargan todas las pilas al mismo tiempo. No mezcle pilas nuevas y viejas. No mezcle pilas alcalinas, comunes (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).

Cualquier pila puede perder ácido o explotar si se la desecha en el fuego o se intenta cargar un tipo que no debe recargarse. Nunca recarga una pila de un tipo en un cargador hecho para una pila de otro tipo.

Deseche las pilas con pérdidas inmediatamente. Las pilas con pérdidas pueden causar quemaduras en la piel u otras lesiones personales. Cuando desecha las pilas, asegúrese de desechalas de la manera correcta, según las disposiciones locales y de su estado.

Saque las pilas antes de guardar el producto durante un largo período de tiempo. Las pilas que quedan en la unidad pueden perder y causar daños.

Tipo de pilas recomendadas: alcalinas desechables, tamaño 9 voltios (6LR61). NUNCA mezcle pilas de distintos tipos. Cambie las pilas cuando el producto deje de funcionar satisfactoriamente.




Las pilas deben desecharse correctamente a través del reciclado.



Prenatal Listener



Audífonos (2x)

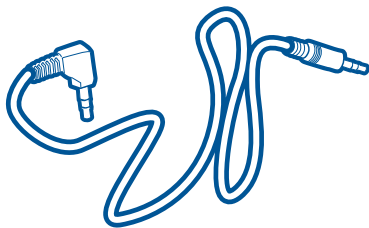

Cable para Grabar

Para escuchar al bebé que no ha nacido

Introducción

Gracias por comprar nuestro Prenatal Listener® de Graco®. Por favor, lea el material que sigue detenidamente para poder disfrutar más este producto.

Es importante entender que muchos factores afectan lo que escuchará con su Prenatal Listener®. La posición de su bebé, el peso de su bebé, su peso, la etapa del embarazo y dónde pone el Prenatal Listener® todos afectarán lo que escuchará.

Por ejemplo, cuando escucha el latido del corazón del bebé que no nació, el sonido será más alto en el tercer trimestre y si el bebé tiene su espalda sobre su ombligo. Su bebé puede cambiar naturalmente de posición, creando la situación de poder escucharlo en un momento y no poder hacerlo un rato después.


Sin embargo, una vez que ha superado el segundo trimestre, su bebé crecerá mucho más rápido y usted escuchará el latido del corazón y todos los otros sonidos en forma más continua.

¡No se preocupe! Es muy normal que ocurran momentos en que no podrá escuchar los sonidos de su bebé debido a la posición o etapa de desarrollo del bebé. Esto es especialmente verdad del latido del corazón que depende mucho de la posición de su bebé.



Por favor, lea para disfrutar nuestro producto

- Por favor, tenga paciencia. Este producto requiere un poco de tiempo pero los resultados son maravillosos. Deberá comenzar a usarlo al comienzo del tercer trimestre.
- Lo que escuchará a través del Prenatal Listener® serán los sonidos naturales de su bebé. Su médico usa equipos de ultrasonido Doppler que produce ruidos artificiales al convertir el movimiento en sonido. El Prenatal Listener® amplifica los sonidos reales de su bebé.
- El mejor momento para escuchar es 3 a 4 horas después de comer y cuando está relajada.
- El Prenatal Listener® debe usarse en una sala con mucho silencio.
- Colocar el control del volumen en el nivel bajo a moderado producirá los mejores resultados y evitará la estática.
- Usted podría no escuchar inmediatamente los sonidos de su bebé de manera que no se sienta frustrada. Cuanto más usa el Prenatal Listener®, aprenderá mejor a encontrar los sonidos. La posición de su bebé también afectará su éxito en gran medida. La mejor posición es cuando la espalda de su bebé se encuentre contra su ombligo. Su éxito también dependerá de cómo está de relajada. Usted podría necesitar tener que probar varias veces antes de escuchar los sonidos de su bebé, en particular el latido de su corazón.
- El latido del corazón de su bebé no suena como el suyo propio. El corazón de un bebé que no ha nacido late entre 120 y 180 veces por minuto. Sonará como un tambor suave que suena con rapidez.
- El Prenatal Listener® no usa ninguna corriente alternada, ultrasonido ni ondas radiofónicas.


Instalación de la pila

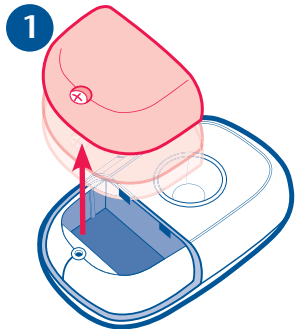


Afloje el tornillo y saque la tapa de la pila e instale una pila nueva de 9 voltios (6LR61) (no se incluye). Le recomendamos que use una pila nueva ya que una vieja podría interferir gravemente con el rendimiento de su Prenatal Listener®. Asegúrese de poner el símbolo positivo (+) con el positivo (+) y el negativo (-) con el negativo (-).

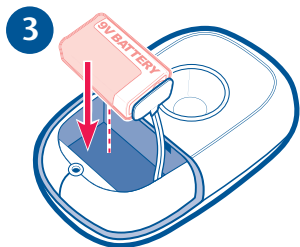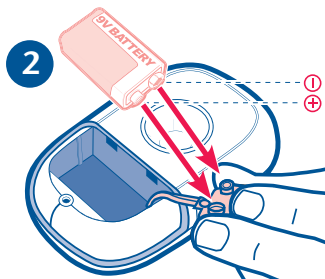

4

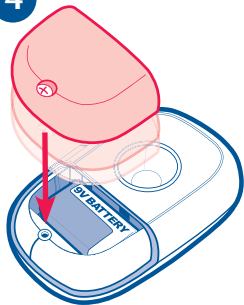


Vuelva a poner la tapa de las pilas y ajuste el tornillo.

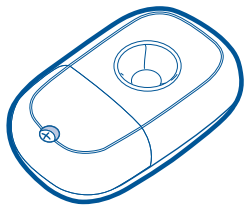


Cómo escuchar a su bebé que no ha nacido ●●●●●

1

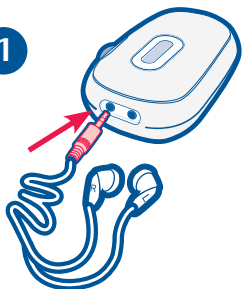


Enchufe el audífono en uno de los enchufes de la unidad y póngaselo en los oídos.


2

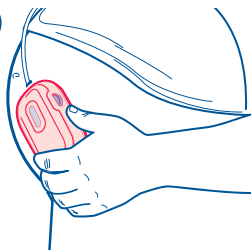

Ponga el Listener sobre su estómago o parte baja de la espalda. Use el Prenatal Listener® sobre la piel desnuda en una sala con mucho silencio.

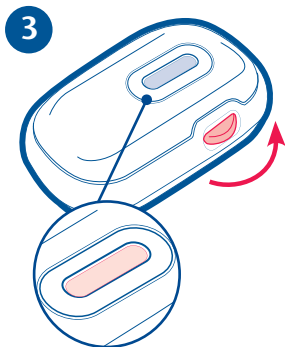


Encienda el Prenatal Listener® girando la perilla de encendido/control del volumen (power/volume) en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que escuche un sonido. El indicador de encendido azul del frente se iluminará para indicar que la unidad está en la posición ENCENDIDA (ON).

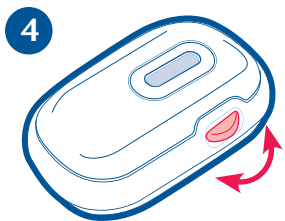


Ajuste el volumen para optimizar el nivel del sonido y la amplificación. Comience con un nivel bajo a moderado para evitar la estática.

5

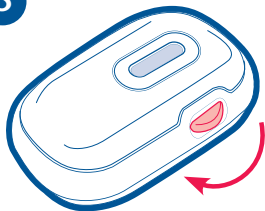


Antes de mover el Prenatal Listener®, ponga el volumen lo más bajo posible (giran la perilla en el sentido de las agujas del reloj) para evitar el sonido del cono que se mueve sobre su piel.

6

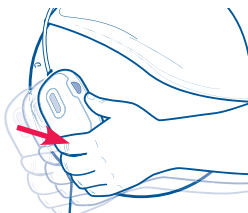

Comience colocando el Prenatal Listener® dos pulgadas debajo y varias pulgadas a la derecha del ombligo. Mueva la unidad suavemente una pulgada por vez a lugares diferentes deteniéndose ocasionalmente hasta que encuentre la mejor posición para escuchar los sonidos de su bebé.


7

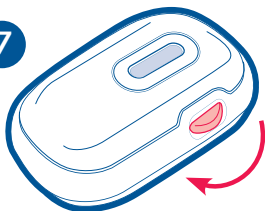

Cuando ha terminado, gire la perilla de encendido/control del volumen en el sentido de las agujas del reloj hasta que escuche un sonido para apagar el Prenatal Listener®. La luz azul del indicador de encendido se apagará.


Cómo grabar al bebé que no ha nacido

1

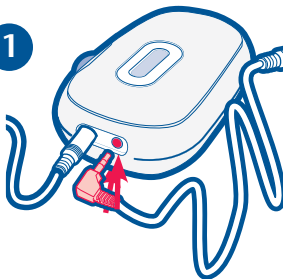


Enchufe el extremo con forma de L del cable para grabar en uno de los enchufes del Prenatal Listener®.

2

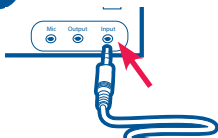

Enchufe el extremo recto en la entrada de la línea de su grabador (algunos grabadores portátiles no incluyen esta entrada). Si su grabador no tiene una entrada para la línea, use la entrada del micrófono.

3

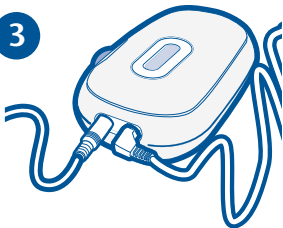

Programa el Prenatal Listener® para escuchar a su bebé.

4

Ajuste el nivel de grabación del grabador si fuera necesario.


5

Sostenga el Prenatal Listener® sin que se mueva y comience a grabar. Recuerde, el sonido de los latidos de su corazón puede tener un efecto tranquilizador y calmar a su bebé. Le convendría grabar su propio latido antes de que nazca el bebé. Entonces podrá reproducir el latido de su corazón grabado a su bebé después del nacimiento. Recomendamos una grabación de 30 minutos.


NOTA: Usted necesitará reducir el volumen cuando graba su propio latido del corazón ya que es mucho más fuerte que el de su bebé que no ha nacido.

Cómo grabar y enviar la grabación por correo electrónico usando una computadora (si está disponible).

Si un grabador del sonido está disponible en su computadora, puede usarlo para grabar los sonidos del bebé.

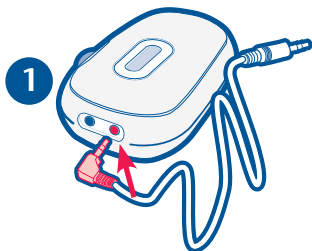

Enchufe el extremo con forma de L del cable para grabar en uno de los enchufes del Prenatal Listener®.

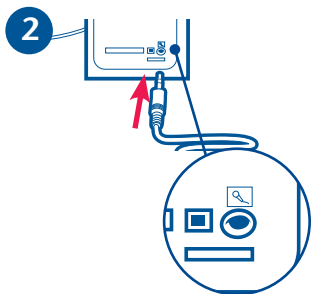

Enchufe el extremo en el enchufe del micrófono de su computadora. La imagen de un micrófono cerca del enchufe lo indica o el enchufe tiene color rosado en la parte trasera de su computadora.

3 Consulte el manual del usuario de su computadora para obtener instrucciones detalladas sobre cómo acceder y usar su programa para grabar sonidos.

Información adicional sobre el producto

Sugerencias para el uso del Prenatal Listener®

- El Prenatal Listener® incluye un poderoso amplificador que es necesario para escuchar los sonidos suaves que produce su bebé. Para proteger sus oídos y prevenir la realimentación (chillidos), no encienda la unidad a menos que el dispositivo esté contra su cuerpo.
- Hay muchos sonidos diferentes que produce su bebé y su cuerpo. Aumentar el volumen también aumenta estos sonidos. Mantener el volumen a un nivel moderado generalmente produce los mejores resultados; por lo tanto, ajuste el volumen cuidadosamente.
- El latido del corazón de su bebé es un sonido con muy bajo volumen y es difícil de detectar hasta el tercer trimestre. Paciencia y escuchar con mucha atención son necesarios para encontrar la mejor posición para escuchar el latido del corazón. Es perfectamente normal escucharlo algunos días y no en otros debido a la posición y los movimientos de su bebé. También es normal que lo escuche en un momento y no en el siguiente. ¡No se preocupe! Es muy natural que su bebé cambie de posición.

Solución de desperfectos ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1. No puede escuchar al bebé que no ha nacido con el Prenatal Listener®.

- a. Podría ser demasiado temprano en su embarazo para escuchar a su bebé. Espere hasta llegar al tercer trimestre cuando el latido del corazón del bebé que no ha nacido sea más fuerte.
- b. Es muy normal no escuchar a su bebé debido a su posición. Pruebe de nuevo más tarde. El mejor momento para escuchar es 3 a 4 horas después de comer y cuando está relajada. También le convendría tratar de poner el Prenatal Listener® contra la parte inferior de su espalda ya que podría ayudar a minimizar la interferencia de los propios sonidos de su cuerpo.
- c. La unidad no está encendida. Encienda la unidad girando la perilla de encendido/ control del volumen en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que escuche un sonido y se encienda la luz azul del indicador de encendido.

d. El control del volumen está demasiado bajo. Aumente el volumen girando la perilla de encendido/control del volumen en el sentido contrario a las agujas del reloj.

e. Los audífonos no están conectados al monitor. Asegúrese de que los audífonos estén debidamente enchufados en uno de los enchufes del monitor.

f. La pila está descargada. La luz azul del indicador de encendido perderá su intensidad. Inserte una nueva pila alcalina de 9 voltios (6LR61).

g. La pila no está colocada correctamente. Abra el compartimiento de la pila y verifique para estar seguro que el símbolo positivo (+) está conectado al positivo (+) y el negativo (-) al negativo (-).

2. Hay realimentación (chillidos) cuando usa el Prenatal Listener®.

a. El volumen es demasiado alto. Baje el volumen girando la perilla en el sentido de las agujas del reloj.

b. Baje el volumen antes de mover el Prenatal Listener® contra su piel.

3. No puede grabar desde su Prenatal Listener®.

a. El cable para grabar no está enchufado correctamente. Asegúrese de que el extremo del cable para grabar esté correctamente enchufado en uno de los enchufes del Prenatal Listener® y el extremo recto en la entrada de la línea de su grabador.

b. El grabador no funciona. Asegúrese de que el grabador funciona. Cambie las pilas si fuera necesario.

c. El control del volumen está demasiado bajo en el grabador. Suba el volumen

NOTA: Consulte el manual de instrucciones de su grabador.

4. Hay demasiado ruido en el ambiente y hace un sonido raro cuando lo muevo.

Baje el volumen ANTES de mover el Prenatal Listener® de un lugar a otro y no lo suba de nuevo hasta que deje de moverlo contra su vientre.





Información sobre la garantía y las piezas de repuesto (EE.UU.)

Para comprar piezas o accesorios o para obtener información sobre la garantía en los Estados Unidos, por favor comuníquese con nosotros en:

Graco Children's Products
3 Glenlake Parkway
Atlanta, GA 30328

www.gracobaby.com
1-800-345-4109

Registro del producto (EE.UU.)

Para registrar su producto Graco desde dentro de los EE.UU., visítenos en línea en

www.gracobaby.com/productregistration.

Actualmente no aceptamos registros de los productos de quienes viven fuera de los Estados Unidos de América.

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>